

# NÄYTTEENOTTO, DNA & RNA ERISTYS

SWABS

**Isoheli**™  
DNA/RNA Sampling and Purification




**Kysy meiltä lisätietoa!**

**id** immuno  
diagnostic oy

info@immunodiagnostic.fi  
Tel. +358-3-615 370  
www.immunodiagnostic.fi

**Isohelixin näytteenottotikut (swab)** on hyvä vaihtoehto poskisolujen keräämiseen, mutta toimii hyvin myös iholle ja eri pinnoille.

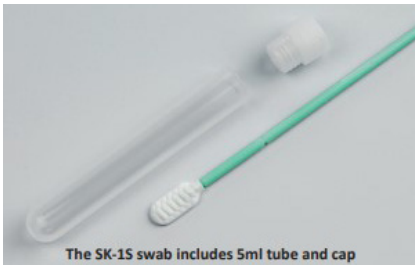

### Näytteenottotikku 5 ml:n putkella:

- Näytepää katkaistaan putkeen ja korkki suljetaan
- Yksittäispakattu swab ja 5 ml:n putki korkilla
- SKU: SK-1S, 100 kpl
- Saatavilla myös pelkkiä yksittäispakattuja näytteenottotikkuja (SK-3S) sekä kahden tikun pakkauksissa (SK-4S)



SK-1S näytteenottotikut on saatavilla myös silicageeli-kapseleiden (Dri-Capsule, SGC-50) kanssa. **Dri-Capsuleiden** avulla näytteet säilyvät **3+ vuotta** huoneenlämmössä.

**Helppokäyttöinen ja nestevapaa vaihtoehto BuccalFixille!**



### Näytteenottotikku 2 ml:n putkella:

- Näytepää irrotetaan putkeen ja korkki suljetaan
- Yksittäispakattu swab ja 2 ml:n putki erikoiskorkilla
- SKU: SK-2S, 100 kpl



### RapiDri-kuivauspussit:

Näytteenottotikkuja on saatavilla myös RapiDri-kuivauspussien kanssa (SKU: RD-01 Näytteenottotikku & pussi, 200 kpl).

Kun näytteenottotikku laitetaan tähän pussiin, näyte säilyy kuivauspussissa vähintään 3 kk.

Pitkäaikaiseen säilytykseen näytteet siirretään -20 °C, ja voidaan säilyttää siihen asti, kunnes DNA eristetään. DNA:n eristyskitit on listattu esitteen kääntöpuolelle.



### Mini näytteenottotikut pienille eläimille:

- **MS Mini DNA Isohelix Swab (MS-01)**
- Mahtuu pieniin putkiin, helposti automatisoitavissa
- Soveltuu genotyyppaukseen
- Sopii eläinlääkärikäyttöön, pienille nisäkkäille, hiirille, kaloille

## Sylkinäytteet

### Isohelix GENEFIX™ saliva DNA collection device & stabilization buffer

Sylkinäytteenottoon saatavilla suosittu CE-IVD merkitty tuote, jossa DNA näyte säilyy viisi vuotta huoneenlämmössä.



### Isohelix GENEFIX™ saliva DNA microbiome collection device

Soveltuu suun mikrobiomin keräämiseen ja säilyttämiseen huoneenlämmössä 12 kuukautta.



## Ulostenäytteet



Mikrobiomi DNA:lle optimoitu ulostenäytteiden stabilointipuskuri **StoolFix™** on saatavilla valmiina 2 ml:n putkissa (STF-50)

Stabiloitu näyte säilyy useamman kuukauden huoneenlämmössä. Helppo menetelmä, joka soveltuu mm. kotona tapahtuvaan näytteenottoon.

Sopii hienosti SK-näytteenottotikkujen kanssa käytettäväksi.

## BuccalFix-säilytysliuos stabiloi DNA:n pitkäksi aikaa!

- Soveltuu DNA:n pitkäaikaiseen säilytykseen ja kuljetukseen huoneenlämmössä
- Voidaan käyttää useiden DNA:n eristyskittien kanssa
- Saatavilla käyttövalmiina 2 ml:n putkissa sekä bulkkina (25 ml)

**BFX-50 BuccalFix Tubes** Sarstedt 2ml Screw Cap Tubes Pre-Filled with 0.5ml BuccalFix Stabilization Buffer, 50 kpl

**BFX-25 BuccalFix Bulk**, 25 ml (50 swab-näytteelle)



# DNA

# RNA

**Isohelix™ DNA Isolation Kitit** ovat helppokäyttöisiä ja DNA:n saanto on erinomainen. Eristyskittejä on eri tarkoituksiin, valitse sinulle sopivin!

## DNA/RNA-eristyskitit poskipyyhkäisynäytteille (Buccal Swabs)

- **BuccalFix Plus** - BuccalFix:ssa säilyville näytteille
- **BuccalPrep Plus** - sopii kaikille buccal swab -näytteille
- **Xtreme** - soveltuu sylki- ja swabnäytteille, käytetään puhdistuspylväitä
- **Buccal-Mag** - magneetti-biidi-menetelmä
- **Xtreme-RNA** - RNA:n eristykseen

**DNA-eristyskitit myös sylkinäytteille!**



## PCR-valmista DNA:ta alle 20 minuutissa!

**Buccalyse (BEK-50):** PCR-valmista DNA:ta alle 20 minuutissa yhdessä putkessa. Vain 15 min 70C ja 2 min 95C!

